

Nestemäinen pesuaine (invasiivisten ja ei-invasiivisten) lääkinnällisten laitteiden puhdistamiseen

Kuvaus tuotteesta

Suma Med Alu Pur-Eco on tiivistetty nestemäinen pesuaine, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa ultraääni- ja pesukoneiden desinfiointilaitteissa (invasiivisten ja ei-invasiivisten) lääkinnällisten laitteiden puhdistamiseen.

Ominaisuudet

Suma Med Alu Pur-Eco on nestemäinen pesuaine, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa ultraääni- ja pesukoneiden desinfiointilaitteissa monien laboratoriodien ja lääkinnällisten laitteiden puhdistukseen. Suunniteltu erityisesti käytettäväksi pehmeille metalleille, kuten alumiinille, kuparille tai hopealle.

Edut

- Turvallinen käyttää alumiinille ja muille pehmeille metalleille
- Sisältää voimakkaita emulgointi- ja dispergointiaineita rasvan ja proteiinin poistamiseksi
- Sopii kaikkiin vesiolosuhteisiin
- Tiivistetty koostumus antaa erinomaisen taloudellisuuden käytössä
- EU-ympäristömerkitty

Käyttöohje

Suma Med Alu Pur-Eco -valmistetta käytetään yleensä Diversey'n annosteluautomateilla. Sitä voidaan kuitenkin käyttää yhdessä integroitujen annostelupumppujen kanssa, jos sellainen on asennettu. Ensimmäisen käytön aikana huuhtelee annostelujärjestelmän pumppu ja kuljetusputket, jotta vältetään tuotteiden sekoittumisen aiheuttama kiteytyminen näissä putkissa. Kuivaa lääkinnällinen laite ennen käyttöä. Lisäksi lääkinnälliset laitteet on steriloitava edelleen, jos ne ovat invasiivisia. Erityiset käsi- ja suojalasit tai suojalasit vaaditaan normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Sovellus

Suma Med Alu Pur-Eco on tarkoitettu tiivistetyksi nestemäiseksi pesuaineeksi, joka on erityisesti suunniteltu käytettäväksi monenlaisissa ultraääni- ja pesukone-desinfiointikoneissa. Suunniteltu erityisesti käytettäväksi pehmeille metalleille, kuten alumiinille, kuparille tai hopealle. Yhteensopiva ruostumattoman teräksen kanssa. Tuote on tarkoitettu kertakäyttöiseksi.

Aiotut käyttäjät

Valtuutettu koulutettu henkilöstö terveydenhuollon laitoksessa. Vain ammattikäyttöön.

Annostus*

Annostelee automaattisesti 1-2 ml/l paikallisista olosuhteista riippuen pesukoneeseen.


**Tämä annostus on optimaalisten olosuhteiden mukainen, suositukset voivat vaihdella. Ota yhteyttä Diversey-edustajaasi saadaksesi lisäohjeita.*



EU Ecolabel: SE/038/001



Diversey Europe
Operations B.V.
Maarssebroeksedijk 2,
3542 DN Utrecht,
The Netherlands

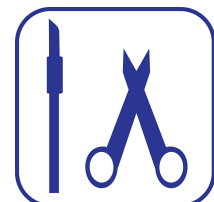



Suma Med Alu Pur-Eco

L10

Tekniset tiedot

Ulkonäkö:	Kirkas vaaleankeltainen neste
Tuoksu:	Hajuton
pH-arvo (laimentamaton):	> 11.5
pH-arvo (käyttöliuos):	> 11 (0.4 %)
Suhteellinen tiheys (20°C):	≈ 1.27

Yllä olevat tiedot ovat tyyppisiä normaalituotannossa. Niitä ei voi käyttää ohjeavoina.

Käyttöturvallisuus ja varastointi

*** please contact Henk-Jan to provide your translation for this new standard sentence on CE-marked PIS's ***

Varoitus

Varastointilämpötilat 0-40 °C. Jos Suma Med Alu Pur-Econ käyttöön liittyy vakava vaaratilanne, käyttäjän on ilmoitettava siitä paikalliselle Diverseyn toimistolle ja sen jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, johon käyttäjä ja/tai potilas on sijoittautunut. Älä käytä uudelleen. Tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi ihmisen iholla. Suma Med Alu Pur-Eco ei ole tarkoitettu käytettäväksi huokoisissa tai emäksisissä herkissä lääkinnällisissä laitteissa alumiinia lukuun ottamatta. Ei saa käyttää polyeteenitereftalaatista (PET) valmistetuissa lääkinnällisissä laitteissa. Ilman asianmukaista sterilointia tuotetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi invasiivisissa lääkinnällisissä laitteissa, jotka tunkeutuvat kudokseen tai tunkeutuvat verenkiertoon eivätkä joudu suoraan kosketukseen ehjien limakalvojen kanssa. Älä käytä Suma Med Alu Pur-Ecoa muovisiin lääkinnällisiin laitteisiin. Muita kuin tunnistettuja käyttötarkoituksia ei suositella. Pese kädet ennen taukoja ja työpäivän päätteeksi. Pese kasvat, kädet ja paljaana oleva iho huolellisesti käsittelyn jälkeen. Poista välittömästi kaikki saastuneet vaatteet. Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita tarpeen mukaan. Käytä vain riittävällä ilmanvaihdolla. Suma Med Alu Pur-Eco sisältää dinatriummetasilikaattia (natriummetasilikaattia) ja voi aiheuttaa: ihoärsytystä, vakavia silmävaurioita. Turvalausekkeet: Käytä silmä- tai kasvosuojaimia. Huuhteleva varovasti vedellä useita minutteja. Poista piilolinssit, jos niitä on ja helppo tehdä. Jatka huuhtelua. Soita välittömästi MYRKYTYSKESKUKSEEN, lääkäriin tai lääkäriin.

Henkilösuojaimet

Suosittelut turvatoimenpiteet laimentamattoman tuotteen käsittelyyn: Kattaa toiminnot, kuten täyttö ja tuotteen siirtäminen levityslaitteisiin, pulloihin tai kauhoihin.

	Personal Protective Equipment
Silmien/kasvojen suojaus	Suojalasit (EN 166).
Käsien suojaus	Kemikaaleja kestävät suojakäsineet (EN 374).

Suosittelut turvatoimenpiteet laimennetun valmisteen käsittelyyn: Ei erityisvaatimuksia normaaleissa käyttöolosuhteissa.

Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

Tiivistetty sisältö tai saastunut pakkaus on hävitettävä sertifioidun käsittelijän toimesta tai laitosluvan mukaisesti. Jätteiden päästämistä viemäriin ei suositella. Puhdistettu pakkausmateriaali soveltuu energian talteenottoon tai kierrätykseen paikallisen lainsäädännön mukaisesti.

Euroopan jäteluettelo: 20 01 29* - vaarallisia aineita sisältävät pesuaineet.

Tyhjät pakkaukset Suositus: Hävitä kansalliset tai paikalliset määräykset.

Sopivat puhdistusaineet: Kastele tarvittaessa puhdistusaineella.

www.diversey.com

© 2024 Diversey, Inc. All Rights Reserved. 30/08/2024 fi-FI (K02319)